

Suturas No Absorbibles TAGUM

35 cm

5/0

WZ9

PE0864Z0

TAGUM

Poliéster Trenzado Verde

Sutura No Absorbible

C. Cardillo

Doble Aguja 1/2 Círculo

Espatulada 8 mm

TAGUMERICA S.A.

LOT:

EXP:

TAGUM

DESCRIPCIÓN

El poliéster es un material sintético trenzado recubierto, lo cual permite un paso muy suave por los tejidos. De característica no trombogénica, no capilar y de excelente seguridad en el anudado. El poliéster es inerte y resistente a la flexión y tracción. Su composición está basada en poliéster de etileno de tereftalato recubierto con teflón o silicona.

USOS FRECUENTES

Generalmente utilizado en:
- Cirugía General.
- Oftalmología.
- Cirugía Cardiovascular.
- Ortopedia y Traumatología.
- Ginecología y Obstetricia.

TIPO DE ABSORCIÓN

No absorbible.

COLOR

Verde o Blanco.

ESTRUCTURA

Trenzada Recubierta.

CALIBRES

6/0 a 5.

ESTERILIZACIÓN

Oxido de Etileno.

PRESENTACIÓN

- En diferentes longitudes y número de hebras, con o sin aguja(s) de acero quirúrgico.
- Con o sin almohadilla de teflón.
- Disponible en cajas de 6, 12, 24 y 36 unidades.

35 cm

4mm

H9999

PE2191ZH

TAGUM

Cinta de Poliéster

Sutura No Absorbible

C. Cardillo

Doble Aguja 1/2 Círculo

Redonda con punta

Roma 65 mm

TAGUMERICA S.A.

LOT:

EXP:

TAGUM

DESCRIPCIÓN

Es una sutura quirúrgica no absorbible, compuesta de poliéster de etileno de tereftalato recubierto con teflón o silicona. Las fibras se producen en forma de monofilamento unidas por un proceso de trenzado.

USOS FRECUENTES

Indicada para el cerclaje del cuello uterino en mujeres gestantes y para la separación de tejidos sin riesgo de provocar daño tisular.

TIPO DE ABSORCIÓN

No absorbible.

COLOR

Crema.

ESTRUCTURA

Cinta.

ANCHO

4 mm.

ESTERILIZACIÓN

Oxido de Etileno.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cintas de 50 cm de largo con doble aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12 unidades.
- Multiempaque en longitudes predeterminadas.

25 cm

6/0

DRS19

PP0780ZK

TAGUM

Polipropileno

Sutura No Absorbible

C. Cardillo

Doble Aguja 3/8 Círculo

Redonda 13 mm

TAGUMERICA S.A.

LOT:

EXP:

TAGUM

DESCRIPCIÓN

El polipropileno es obtenido mediante la extrusión del polímero de polipropileno. El hilo es no capilar, resistente a la tracción y químicamente inerte. Debido a su característica no trombogénica es apropiado para la cirugía cardiaca y vascular periférica. Asimismo, se utiliza de preferencia en zonas infectadas o inflamadas. El hilo es pigmentado de azul con colorantes inocuos.

USOS FRECUENTES

Utilizado para unir o ligar tejidos, en todo procedimiento quirúrgico que se requieran suturas no absorbibles.

TIPO DE ABSORCIÓN

No absorbible.

COLOR

Azul.

ESTRUCTURA

Monofilamento.

CALIBRES

10/0 a 1.

ESTERILIZACIÓN

Oxido de Etileno.

PRESENTACIÓN

- Disponible en diferentes longitudes y número de hebras, con o sin aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

25 cm

2/0

HS 35

L1107FK

TAGUM

Lino Quirúrgico

Sutura No Absorbible

C. Cardillo

1/2 Círculo

Cortante 25 mm

TAGUMERICA S.A.

LOT:

EXP:

TAGUM

DESCRIPCIÓN

La materia prima para el lino es la fibra liberiana de la planta linácea (lino). Por el origen de la materia prima, la superficie del lino es ligeramente desigual, garantizando una alta resistencia en el anudado.

USOS FRECUENTES

Sirve para unir o ligar tejidos, en todo procedimiento quirúrgico que se requieran suturas no absorbibles.

TIPO DE ABSORCIÓN

No absorbible.

COLOR

Blanco crema.

ESTRUCTURA

Retorcida.

CALIBRES

5/0 a 3.

ESTERILIZACIÓN

Oxido de Etileno.

PRESENTACIÓN

- Combinaciones de hilos con y sin aguja de acero quirúrgico.
- Multiempaque en longitudes y número de hebras predeterminadas.
- Disponible en cajas de 24 unidades.

Suturas No Absorbibles TAGUM

25 cm

5

WZ999

AB034V30

TAGUM

Acero Inoxidable

Monofilamento

Sutura No Absorbible

C. Cardillo

Cortante 50 mm

TAGUMERICA S.A.

LOT:

EXP:

TAGUM

DESCRIPCIÓN

Es un producto fabricado de una aleación de acero quirúrgico. De una fortaleza extraordinaria, es inerte, maleable, presenta buena conducta en el anudado.

USOS FRECUENTES

Generalmente utilizado en procedimientos quirúrgicos de esternotomías.

TIPO DE ABSORCIÓN

No absorbible.

COLOR

Acero.

ESTRUCTURA

Monofilamento.

CALIBRE

1 a 6.

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno.

25 cm

2/0

HS 35

MCP-0011

TAGUM

Hilo de Marcapaso

Recubierto con Polímero Anaranjado

Sutura No Absorbible

C. Cardillo

1/2 Círculo

Cortante 60 mm

TAGUMERICA S.A.

LOT:

EXP:

TAGUM

DESCRIPCIÓN

El hilo de marcapaso es un compuesto de filamentos de acero quirúrgico, torcido, recubiertos de polímero de color anaranjado o de color azul. Esta sutura tiene ensamblada en sus extremidades una aguja curva y una recta. La aguja recta tiene una muesca que facilita su corte. El extremo de la sutura sin aislamiento (sin cubierta de polímero) lleva ensamblada una aguja curva.

USOS FRECUENTES

El hilo de marcapaso está indicado para uso temporal en marcapaso cardiaco o de monitoreo.

TIPO DE ABSORCIÓN

No absorbible.

COLOR

Azul o Naranja.

ESTRUCTURA

Multifilamento Torcido.

CALIBRE

2/0

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno.

NUESTRO EMPAQUE

FORMA/AGUJA	PUNTA/AGUJA	TAMAÑO/AGUJA	MATERIAL/HEBRA	LARGO DEL HILO
V= 1/4 CÍRCULO D= 3/8 CÍRCULO H= 1/2 CÍRCULO G= RECTA F= 5/8 CÍRCULO	S= CORTANTE R= REDONDA RR= PUNTA ROMA SP= CORTANTE PREMIUM LZ= ESPATULA RT=REDONDA PUNTA CORTANTE RS= REDONDA MICROPUNTA	4-65 mm.	ABSORBIBLES: CATGUT CRÓMICO CATGUT SIMPLE CINTA DE CATGUT GLUCOSORB® / ÁCIDO POLIGLICOLICO POLIDIOXANONA ÁCIDO POLILACTIN MONOSORB® POLIGLECAPRONE NO ABSORBIBLES: ACERO INOXIDABLE MONOFILAMENTO CINTA DE POLIÉSTER LINO QUIRÚRGICO NYLON AZUL MONOFILAMENTO NYLON NEGRO MONOFILAMENTO NYLON NEGRO TRENZADO POLIPROPILENO SEDA NEGRA TRENZADA SEDA VIRGEN HILO DE MARCAPASO	15 a 150 cm.

FORMA/AGUJA	V= 1/4 CÍRCULO	D= 3/8 CÍRCULO	H= 1/2 CÍRCULO	F= 5/8 CÍRCULO	G= RECTA

35 cm

6/0

DRS19

PP0780ZK

TAGUM

Polipropileno

Sutura No Absorbible

C. Cardillo

Doble Aguja 3/8 Círculo

Redonda 13 mm

TAGUMERICA S.A.

LOT:

EXP:

TAGUM

DESCRIPCIÓN

El polipropileno es obtenido mediante la extrusión del polímero de polipropileno. El hilo es no capilar, resistente a la tracción y químicamente inerte. Debido a su característica no trombogénica es apropiado para la cirugía cardiaca y vascular periférica. Asimismo, se utiliza de preferencia en zonas infectadas o inflamadas. El hilo es pigmentado de azul con colorantes inocuos.

USOS FRECUENTES

Utilizado para unir o ligar tejidos, en todo procedimiento quirúrgico que se requieran suturas no absorbibles.

TIPO DE ABSORCIÓN

No absorbible.

COLOR

Azul.

ESTRUCTURA

Monofilamento.

CALIBRES

10/0 a 1.

ESTERILIZACIÓN

Oxido de Etileno.

PRESENTACIÓN

- Disponible en diferentes longitudes y número de hebras, con o sin aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

25 cm

2/0

HS 35

L1107FK

TAGUM

Lino Quirúrgico

Sutura No Absorbible

C. Cardillo

1/2 Círculo

Cortante 25 mm

TAGUMERICA S.A.

LOT:

EXP:

TAGUM

DESCRIPCIÓN

La materia prima para el lino es la fibra liberiana de la planta linácea (lino). Por el origen de la materia prima, la superficie del lino es ligeramente desigual, garantizando una alta resistencia en el anudado.

USOS FRECUENTES

Sirve para unir o ligar tejidos, en todo procedimiento quirúrgico que se requieran suturas no absorbibles.

TIPO DE ABSORCIÓN

No absorbible.

COLOR

Blanco crema.

ESTRUCTURA

Retorcida.

CALIBRES

5/0 a 3.

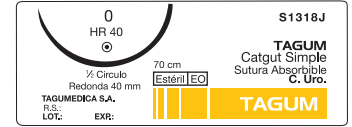
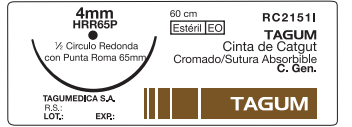
ESTERILIZACIÓN

Oxido de Etileno.

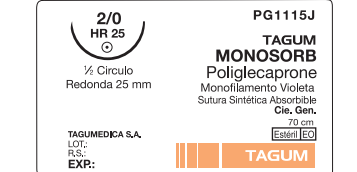
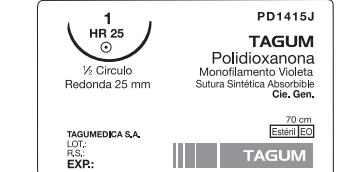
PRESENTACIÓN

- Combinaciones de hilos con y sin aguja de acero quirúrgico.
- Multiempaque en longitudes y número de hebras predeterminadas.
- Disponible en cajas de 24 unidades.

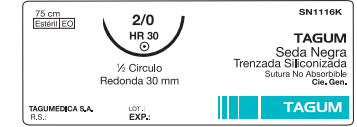
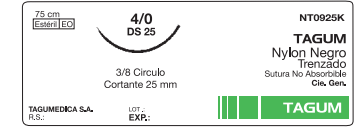
Suturas Absorbibles TAGUM

Catgut Simple	Catgut Crómico	Cinta de Catgut
		
		
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Hilo obtenido por la torsión de filamentos de colágeno puro de serosa bovina. La sutura de catgut simple se presenta en sobre tipo blíster en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.	Hilo obtenido por la torsión de filamentos de colágeno purificado de serosa bovina, previamente tratados con sales de cromo. Este tratamiento proporciona al hilo un color marrón característico y mantiene la resistencia tensil del mismo <i>in vivo</i> al incrementarse el período de absorción. El catgut crómico se presenta en sobre tipo blíster en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.	Es una sutura quirúrgica absorbible biológica, preparada de colágeno derivado del tejido conjuntivo purificado de res o de bovino. Tratada con sales de cromo para prolongar su tiempo de absorción, proporcionando un soporte más duradero para la cicatrización de la herida. La sutura es conservada en una solución preservante.
USOS FRECUENTES	USOS FRECUENTES	USOS FRECUENTES
El catgut simple es utilizado en todo procedimiento quirúrgico que se recomiende suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares.	Utilizado en todo procedimiento quirúrgico que se recomiende suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares. Esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo.	Esta sutura es utilizada en la aproximación de tejido hepático. Uso parenquimal. Esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo.
TIPO DE ABSORCIÓN	TIPO DE ABSORCIÓN	TIPO DE ABSORCIÓN
Por degradación enzimática.	Por degradación enzimática.	Por degradación enzimática.
TIEMPO DE ABSORCIÓN	TIEMPO DE ABSORCIÓN	TIEMPO DE ABSORCIÓN
70 días.	90 días.	Más de 90 días.
COLOR	COLOR	COLOR
Natural.	Marrón.	Marrón.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA
Virtualmente Monofilamento.	Virtualmente Monofilamento.	Cinta.
CALIBRES	CALIBRES	ANCHO
6/0 a 3.	6/0 a 3.	4 mm.
ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
Oxido de Etileno.	Oxido de Etileno.	Oxido de Etileno.
PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN
- En diferentes longitudes de hilos y número de hebras. - Con aguja de acero quirúrgico o sin aguja. - Disponible en cajas de 24 unidades.	- En diferentes longitudes de hilos y número de hebras. - Con o sin aguja(s) de acero quirúrgico. - Disponible en cajas de 24 unidades.	- Disponible en cinta de 4 mm de ancho y diversas longitudes. - Con aguja de acero quirúrgico. - Disponible en cajas de 24 unidades.

Suturas Absorbibles TAGUM

Glicosorb® Acido Poliglicólico	Acido Poliglactin	Monosorb® Poliglecaprone	Polidioxanona
			
			
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
El ácido poliglicólico es un polímero del ácido glicólico. Es una sutura sintética absorbible trenzada a precisión de finos hilos del mismo calibre, que garantizan una alta resistencia, buena aceptación en los tejidos, gran fijación en el anudado, así como una excelente suavidad. Recubierto por policaprolactona y estearato de calcio.	El ácido poliglactin es una sutura quirúrgica absorbible sintética y trenzada, compuesta de un copolímero 90% de glicolida y 10% L-lactida. Presenta una cubierta de poliglactina y estearato de calcio.	El poliglecaprone es un copolímero de glicólido y epsiloncaprolactona. Esta es una sutura monofilamento absorbible, la cual se presenta en color violeta, coloreada con colorantes inocuos.	La polidioxanona es un polímero de poliéster. Es una sutura monofilamento absorbible, la cual puede presentarse incolora y violeta, coloreada con colorantes inocuos. Es apirógena y altamente flexible.
USOS FRECUENTES	USOS FRECUENTES	USOS FRECUENTES	USOS FRECUENTES
Indicado en todo procedimiento que se recomiende suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares.	Indicado en todo tipo de aproximación de tejidos blandos incluyendo la cirugía oftálmica, pero no en cirugía cardiovascular, microcirugía o tejido nervioso. Esta sutura puede utilizarse también como una ligadura.	Indicada en todo procedimiento de aproximación y/o ligadura de tejidos blandos.	Indicada en todo procedimiento de aproximación de tejidos.
TIPO DE ABSORCIÓN	TIPO DE ABSORCIÓN	TIPO DE ABSORCIÓN	TIPO DE ABSORCIÓN
Por acción hidrolítica.	Por acción hidrolítica.	Por acción hidrolítica.	Por acción hidrolítica.
TIEMPO DE ABSORCIÓN	TIEMPO DE ABSORCIÓN	TIEMPO DE ABSORCIÓN	TIEMPO DE ABSORCIÓN
60 a 90 días.	La absorción se completa desde los 60 a 70 días.	Sustancialmente absorbidas a los 60 días y completamente absorbidas a los 90 días.	Mínima hasta los 90 días, esencialmente completa en 210 días.
COLOR	COLOR	COLOR	COLOR
Violeta e Incoloro.	Violeta e Incoloro.	Violeta e Incoloro.	Violeta e Incoloro.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA
Trenzada.	Trenzada.	Monofilamento.	Monofilamento.
CALIBRES	CALIBRES	CALIBRES	CALIBRES
10/0 a 2.	8/0 a 2.	5/0 a 1.	7/0 a 1.
ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
Oxido de etileno.	Oxido de etileno.	Oxido de etileno.	Oxido de etileno.
PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN
- En diversos calibres y longitudes, con o sin aguja de acero quirúrgico. - Disponible en cajas de 12 y 36 unidades.	- En diversos calibres y longitudes, con o sin aguja de acero quirúrgico. - Disponible en cajas de 12 y 36 unidades.	- En diversos calibres y longitudes, con o sin aguja de acero quirúrgico. - Disponible en cajas de 36 unidades.	- En diversos calibres y longitudes, con o sin aguja de acero quirúrgico. - Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

Suturas No Absorbibles TAGUM

Seda Trenzada	Seda Virgen	Nylon Negro/Azul Monofilamento	Nylon Negro Trenzado
			
			
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
La materia prima para la fabricación de seda es el hilado de la especie domesticada del gusano de seda Bombyx mori de la familia Bombycidae. La seda es impregnada con una solución de silicona fisiológicamente inofensiva, resultando un hilo no capilar, repelente al agua y con una superficie lisa que facilita el manejo y el anudado. El hilo es pigmentado de negro con colorantes inocuos.	La seda virgen es una sutura natural no absorbible, compuesta de una proteína orgánica llamada fibroína proveniente de la especie domesticada del gusano de seda Bombyx mori de la familia Bombycidae. Estos filamentos son teñidos con colorantes inocuos.	Hilo sintético monofilamento obtenido de la extrusión de pellets de poliamida. Es inerte, no capilar y de superficie lisa. Debido a su resistencia aún con diámetros muy delgados, el hilo de nylon sirve especialmente para suturas muy finas en la microcirugía y oftalmología. El hilo es pigmentado de negro o azul con colorantes inocuos.	El nylon trenzado se obtiene de un proceso de entrelazado de filamentos obtenidos de la extrusión de pellets de poliamida. El hilo, pigmentado de negro con colorantes inocuos, es no capilar y de buena conducta en el anudado.
USOS FRECUENTES	USOS FRECUENTES	USOS FRECUENTES	USOS FRECUENTES
Ideal para unir o ligar tejidos, en todo procedimiento quirúrgico que se requieran suturas no absorbibles.	Oftalmología.	Indicado para unir o fijar tejidos, en todo procedimiento quirúrgico que se requieran suturas no absorbibles.	Indicado para unir o ligar tejidos, en todo procedimiento quirúrgico que se requieran suturas no absorbibles.
TIPO DE ABSORCIÓN	TIPO DE ABSORCIÓN	TIPO DE ABSORCIÓN	TIPO DE ABSORCIÓN
No Absorbible.	No Absorbible.	No Absorbible.	No Absorbible.
COLOR	COLOR	COLOR	COLOR
Negro.	Negro o Azul.	Azul o Negro.	Negro.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA
Trenzada Recubierta.	Torcida.	Monofilamento.	Trenzada.
CALIBRES	CALIBRES	CALIBRES	CALIBRES
6/0 a 6.	8/0 a 7/0.	10/0 a 2.	6/0 a 2.
ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
Oxido de etileno.	Oxido de etileno.	Oxido de etileno.	Oxido de etileno.
PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN
- Combinaciones de hilo con o sin aguja de acero quirúrgico. - Multiempaque en longitudes y número de hebras predeterminadas. - Disponible en cajas de 24 y 36 unidades.	- Combinaciones de hilo con agujas de acero quirúrgico en longitudes predeterminadas. - Disponible en cajas de 12 unidades.	- Combinaciones de hilo con y sin aguja de acero quirúrgico. - Multiempaque en longitudes y número de hebras predeterminadas. - Disponible en cajas de 12 y 36 unidades.	- Combinaciones de hilo con y sin aguja de acero quirúrgico. - Multiempaque en longitudes y número de hebras predeterminadas. - Disponible en cajas de 36 unidades.